


Crystal NIX

Hidrofóbico
Hápticas de PVDF

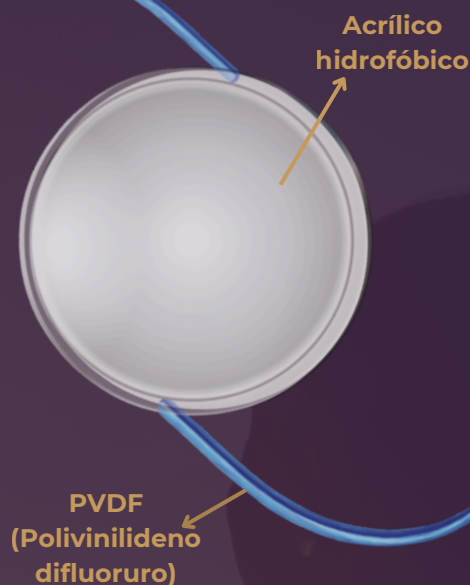


Crystal NIX

El **Crystal NIX** es un lente intraocular hidrofóbico acrílico de tres piezas diseñado para ofrecer una excelente estabilidad capsular y calidad visual superior.

Su estructura combina un óptico biconvexo de 6 mm con borde cuadrado completo de 360°, lo que contribuye a reducir significativamente la opacificación de la cápsula posterior (PCO).

Gracias a sus hápticas de Polivinilideno difluoruro (PVDF,) el Crystal NIX presenta una memoria de forma óptima, gran resistencia a la deformación y un posicionamiento estable tanto en el saco capsular como en el surco ciliar, siendo una alternativa segura incluso en casos con ruptura capsular.

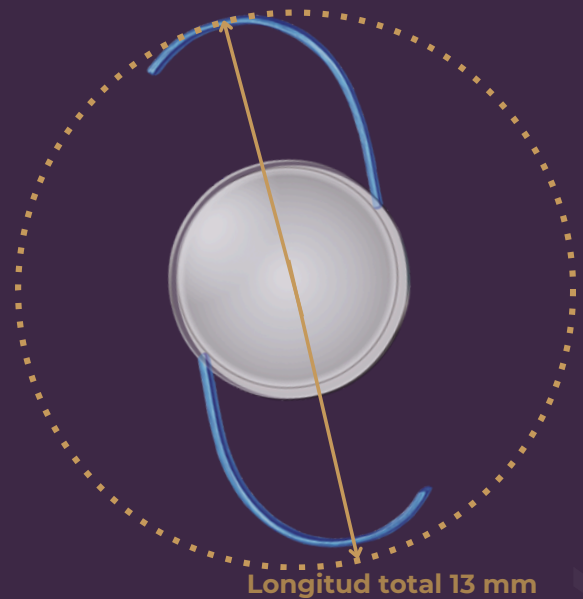

Beneficios Claves

Estabilidad superior: hápticas de PVDF con excelente recuperación elástica, evitando el estiramiento del saco capsular.

Versatilidad quirúrgica: puede implantarse en saco capsular o en surco ciliar, ideal en casos complicados.

Diseño de borde cuadrado 360°: minimiza la incidencia de opacificación capsular posterior (PCO).

Compatibilidad universal: se implanta mediante incisiones de 2.6 mm utilizando el sistema DSM Jet de inyección de titanio reutilizable.



Crystal NIX

Material	Acrílico Hidrofóbico
Diseño del Lente	Acrílico Hidrofóbico con Hápticas PVDF
Diseño de la Óptica	Biconvexo- borde cuadrado de 360° con óptica asférica tórica
Tamaño de la Óptica	6mm
Longitud Total	13mm
Profundidad AC	5.28mm
Índice AC	1.493
Constante A estimada	118.0
Optica A recomendada	A Constant SRK/T : 118.40 A Constant SRK/II : 118.70 Hoffer Q: 5.14 Holladay 1: 1.35 / Holladay 2: 5.199 Haigis: $\alpha_0=0.912/\alpha_1=0.400/\alpha_2=0.100$
Rango de Dioptrias	5.00 D a 30.00D (Saltos de 0.5D)
Tamaño del Cartucho	2.6mm (en el empaque)
Esterilización	ETO

Crystal NIX

TB-068



Cartucho de Sistema de Avance por Rosca

El **inyector DSM** de titanio y reutilizable, permite implantar el Lente Intraocular CRYSTAL NIX a través de una incisión de solo 2.6 mm. (no está incluido con el lente.)

Crystal NIX

Escanéame



¡Contáctenos hoy!

@deloalto.latam

f Deloalto Latam

Miami-Florida

info@deloaltolatam.com

+1 (936) 330-9998

deloaltolatam.com

DELOALTO
Latinoamérica